



i9000

ALL IN for You

La prochaine évolution
du scannage intra-oral

MEDIT

TOUT SAVOIR SUR **INNOVATION**

La caméra Medit i900 est dotée d'une technologie de pointe pour une numérisation plus fluide, une manipulation plus aisée et une meilleure précision de numérisation.

Une façon plus intelligente et plus facile de travailler.

TouchBand™

- Retour lumineux et haptique en temps réel
- Rotation sans bouton

Embout

- Multiple tailles pour une customisation et un confort élevé du patient

Capteur intelligent

- LED et retour d'information haptique



TouchPad

- Commandes personnalisables
- Interaction intelligente sans souris

Pré-chauffage rapide

- Prêt à scanner immédiatement

Compact & léger

- 165g
- 233mm

3ème génération de moteur optique

- Caméra avec Technologie avancée 10-bit

Conception unibody

- Conception sans joint avec une balance parfaite
- Pas de risque biologique
- Câble renforcé



TouchBand™ & TouchPad



Facilité d'utilisation et portabilité inégalées



TOUT SAVOIR SUR **PERFORMANCE**

3ème génération de moteur optique

L'i900 est dotée d'un moteur optique révolutionnaire avec une technologie d'imagerie 10 bits, offrant une clarté d'image inégalée, des couleurs plus vraies que nature et une profondeur de balayage qui capture tous les détails.


La densité d'image s'en trouve améliorée et la profondeur de numérisation accrue

Une expérience fluide et efficace.



TOUT SAVOIR SUR LA PRECISION

Le moteur optique de pointe de l'i900 vous permet de surmonter les obstacles au balayage tels que les métaux réfléchissants et les espaces restreints de la cavité buccale.

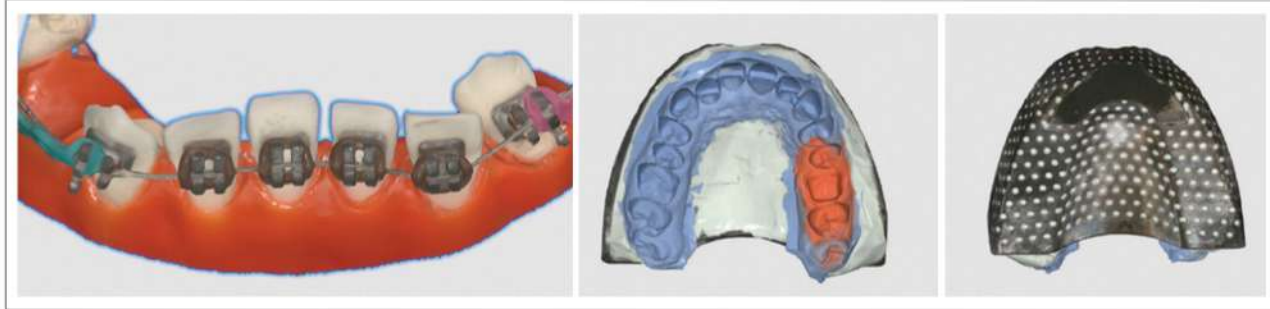

La i900 dispose d'une plus grande surface de balayage pour une capture rapide et complète des données, ce qui en fait le choix idéal pour les cas d'édentement totaux.



TOUT SAVOIR SUR UTILISATION

Léger et ergonomique, la i900 permet à tous les membres de votre clinique de maîtriser la numérisation avec une facilité inégalée.

Un champ de vision élargi permet de capturer une zone plus large avec un minimum d'effort, ce qui garantit la rapidité et la précision de chaque séance.

Une nouvelle conception unibody assure un équilibre parfait et élimine les problèmes de contamination.

Confort patient

Plusieurs types d'embouts pour s'adapter à votre patient.



S: 17.9 x 13.1mm

M: 21.8 x 16.3mm

L: 26.7 x 19.7mm

Fonctionnalités révolutionnaires TouchBand™ & TouchPad

Elevez votre niveau d'expérience utilisateur avec un scanner qui redéfinit le processus de numérisation grâce à une TouchBand et un TouchPad intuitifs. Notre TouchBand 360° révolutionnaire permet une navigation facile avec retour haptique. Un fonctionnement sans bouton vous offre un contrôle précis quel que soit l'angle de vue et vous permet de démarrer et d'arrêter facilement le balayage.

Ergonomique avec une interaction intelligente

Léger. Compact. Portable.
Léger (165 grammes) et conçu pour faciliter la numérisation, notre scanner compact et portable offre une liberté totale.

Indicateurs LED lumineux

Les indicateurs LED situés sur la partie inférieure offrent une visibilité claire et rapide de l'état de votre scanner, ce qui simplifie encore davantage votre expérience globale.




TOUT SAVOIR SUR

FACILITE D'UTILISATION

Bénéficiez d'une
expérience sans
souci dès le départ

La Medit i900 est la solution de numérisation complète pour votre cabinet. Chaque i900 est livrée avec un ordinateur portable optimisé et administré par Medit, ce qui signifie que vous n'aurez jamais à vous soucier des changements de logiciels ou de performances insuffisantes. De plus, chaque i900 bénéficie du service client en direct de Medit et d'une garantie de 3 ans, ce qui garantit votre tranquillité d'esprit.

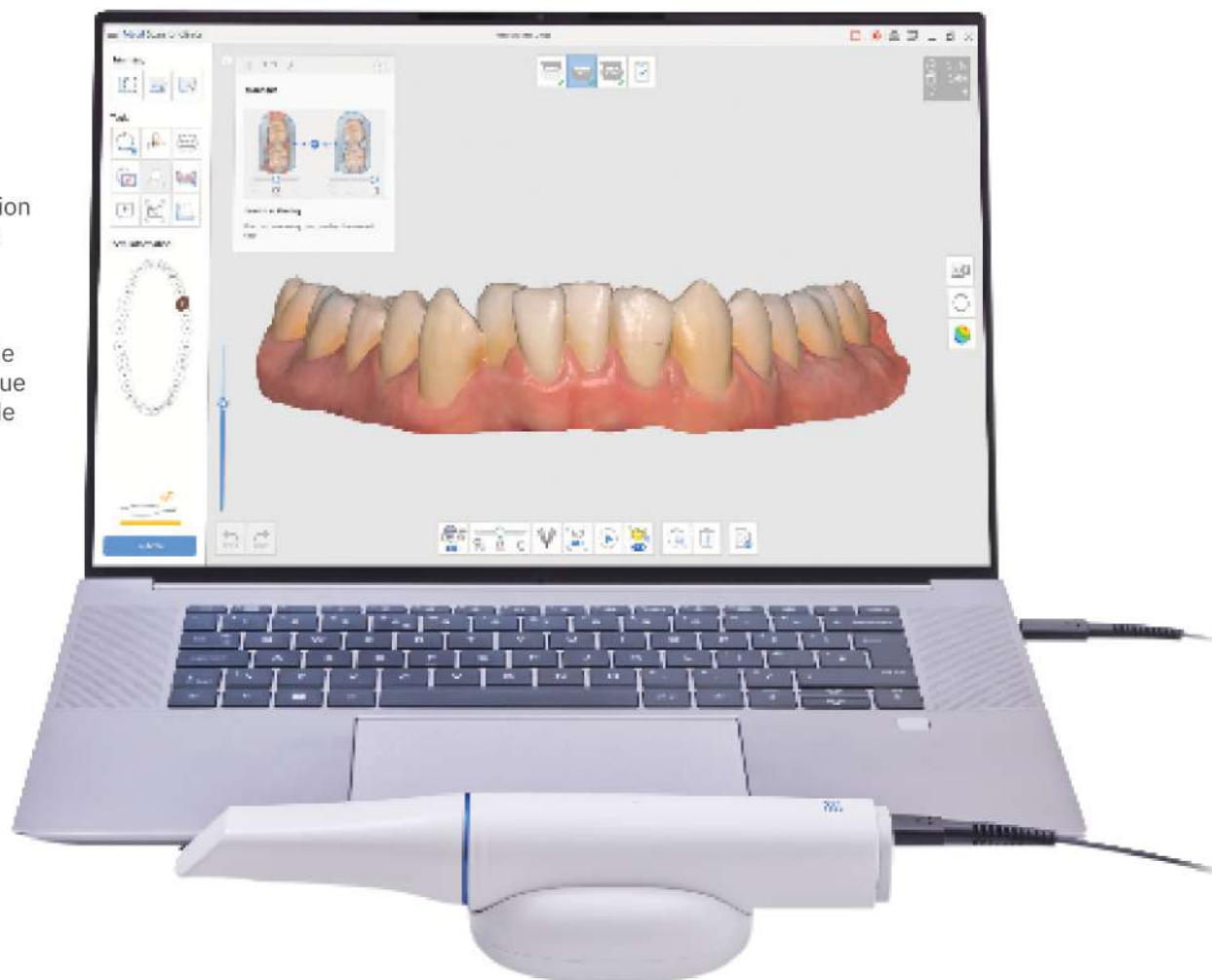

Simple à installer. Commencez à numériser dès la mise en route.

TOUT EN UN




- Corps et embouts i900
- 4 embouts en deux tailles différentes
- 2 câbles flexibles
- Ordinateur portable préconfiguré avec Medit
- Medit Link installée
- Garantie de 3 ans et service direct de Medit pour une tranquillité d'esprit totale

Intégration simple

Medit Link, notre système entièrement ouvert, intègre l'i900 à votre logiciel de cabinet existant, améliorant ainsi les flux de travail sans complication. Il évolue en permanence grâce à des mises à jour logicielles continues et adaptatives pour améliorer les fonctions intelligentes, les consultations avec les patients et la communication avec les laboratoires.

MEDIT Link

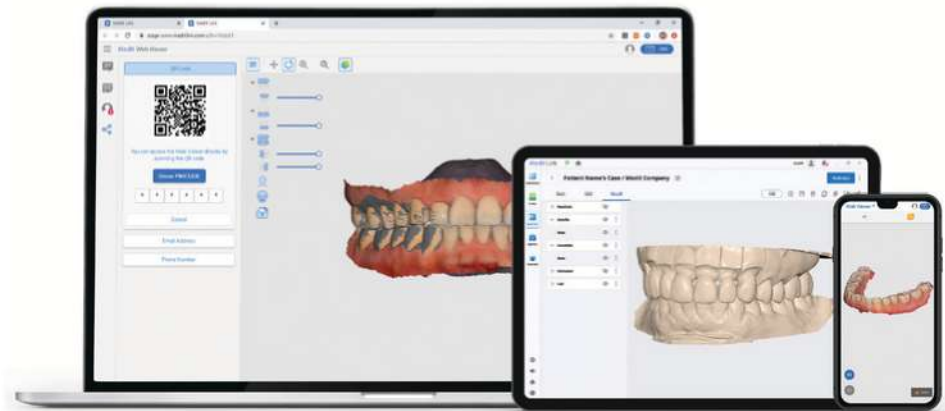



TOUT SAVOIR SUR

SEANCE AU FAUTEUIL

Une meilleure expérience patient

L'i900 vous permet de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : fournir des soins exceptionnels aux patients. Les scans très détaillés favorisent l'acceptation des traitements et réduisent les allers et retours avec le laboratoire, de sorte que vos patients obtiennent rapidement ce dont ils ont besoin. De plus, les différentes tailles d'embouts vous aident à créer l'expérience la plus confortable possible pour le patient.

Votre succès, notre service

Spécifications

| Catégorie | | Medit <i>i</i> 900 |
|-------------|-----------------------|--|
| Technologie | Taux de capture | le plus rapide |
| | Technologie d'image | Technologie vidéo 3D en mouvement/ Capture de flux 3D en couleurs |
| | technologie Anti-buée | Système anti-buée adaptatif |
| | Prise de vue | 10 bit |
| Précision | Arcade complète | 10.9 µm ± 0.98 |
| Dimensions | Dimensions | 223.4 x 36.7 X 35.3mm |
| | Poids total | 165g |
| Embout | Taille | L: 26.7 x 19.7mm M: 21.8 x 16.3mm S: 17.9 x 13.1mm (sold separately) |
| | Champ (Résolution) | L: 18 x 15mm (552 x 460 px) M: 14 x 11.5mm (428 x 352 px) S: 10 x 8 mm (308 x 252 px) |
| | Autoclavable | Jusqu'à 150 fois Autoclave 121°C 30 mins Autoclave 134°C 4 mins Autoclave 135°C 10 mins |
| | Matériau | PPSU Polyphenylsulfone (utilisé pour les biberons) |
| | Réversible | Non |
| Cable | | C Power Delivery: 2m & 2.5m |

FPO Pending delivery



i9000

La Medit i900 n'est pas juste une caméra avec une technologie de pointe et une facilité d'utilisation remarquable. Il n'y a pas non plus de coûts cachés ou d'abonnements à souscrire - juste un pack tout en un avec tout ce dont vous avez besoin pour rationaliser les flux de travail et les soins aux patients.

TOUT POUR VOTRE SUCCES